

# TUBE

| Malleable Penile Prosthesis |

Улучшенная конструкция  
для **максимального эффекта**,  
когда важна  
уверенность в себе



**Promedon**  
— People + Innovation



## МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Передовые исследования и разработки в сочетании с материалами высшего качества обеспечивают устойчивость протеза **TUBE** к сгибанию.

Уникальная конструкция обеспечивает осевую жесткость и эффективность, когда это так необходимо.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Сердечник из серебряной скрученной проволоки обеспечивает осевую жесткость и гибкость изделия.
- ▶ Покрытие серебряного сердечника из политетрафторэтилена – надежность фиксации имплантата.
- ▶ Внешнее покрытие закругленной формы изготовлено из биосовместимого силиконового эластомера.
- ▶ Благодаря отдельным рентгеноконтрастным силиконовым удлинителям в задней части, протез можно сделать нужной длины.

## Осевая жесткость полового члена

Удовлетворенность пациента и его партнера непосредственно связана с уровнем осевой жесткости полового члена. Протез **TUBE** соответствует строгим стандартам качества и образцам, что гарантирует высокий уровень осевой жесткости.



После имплантации протеза полового члена от его осевой жесткости зависит удовлетворенность пациента и его партнера.

Абдулла Аль-Ансари, Раид А. Талиб, Ондер Кангунен, Ахмад Шамсодини – DOI: 10.4081/aiua.2013.3.138

«Целью этого исследования была оценка осевой жесткости и ее связи с удовлетворенностью пациентов и их партнеров».... «Согласно нашим результатам для удовлетворенности пациентов с имплантированными протезами полового члена требуется осевая жесткость почти в 1000 г по цифровому ригидометру изгиба (DIR)».






# TUBE

Malleable Penile Prosthesis

## ПРЕВОСХОДНАЯ ГИБКОСТЬ

Конструкция из серебра, политетрафторэтилена и силикона придает протезу **TUBE** уникальную гибкость, которая позволяет пациенту располагать имплантат под углом до 130°.

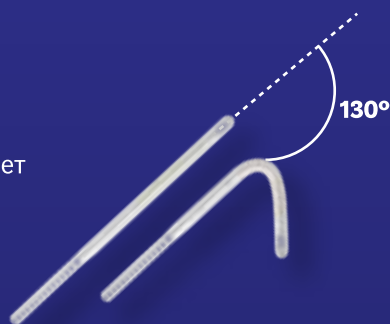

## НАДЕЖНОСТЬ И КОМФОРТ


Технология изготовления гибких протезов полового члена **TUBE** гарантирует нужную твердость каждого сегмента имплантата.

Мягкая дистальная часть минимизирует риск раздражения и эрозии.

Более жесткая проксимальная часть значительно повышает стабильность и фиксацию.

Внешняя поверхность силиконового корпуса предотвращает вращение.

## СТЕПЕНИ ТВЕРДОСТИ СИЛИКОНА

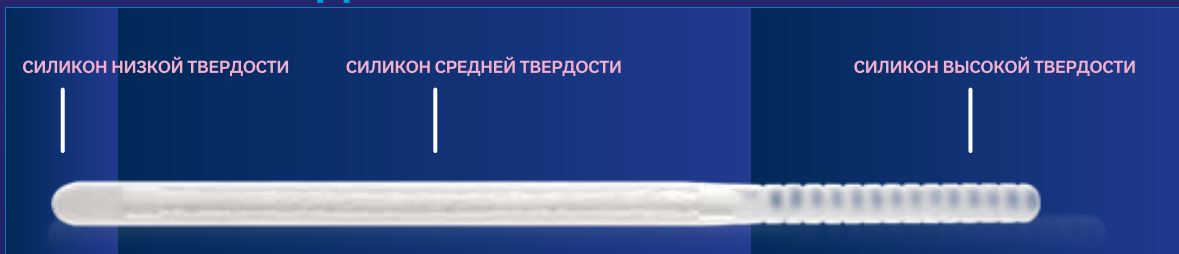

## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ДЛИНУ

Для достижения высокой эффективности и долговечности очень важно выбрать правильную длину протеза.

Конструкция проксимальной части позволяет ее укорачивать, чтобы подобрать длину протеза в соответствии с общей длиной тел полового члена.

Необходимо строго следовать руководству по хирургической методике установки гибкого протеза полового члена **TUBE**, чтобы выбрать правильную длину протеза в каждом конкретном случае.

Рентгеноконтрастные удлинители задней части прикрепляются к проксимальной части имплантата, что позволяет точно подобрать окончательную длину имплантата и придать ему округлую форму для мягкого контакта с проксимальными отделами кавернозных тел.



# TUBE

| Malleable Penile Prosthesis |



| КОД<br>ПРОДУКТА | А<br>(мм) | В<br>(мм) | С<br>(мм) |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| T-090           | 65        | 135       | 9         |
| T-100           | 65        | 155       | 10        |
| T-110           | 70        | 170       | 11        |
| T-120           | 80        | 180       | 12        |
| T-120VS         | 60        | 155       | 12        |
| T-130           | 80        | 187       | 13        |
| T-130VS         | 80        | 172       | 13        |

**Каждый набор TUBE содержит:**

- 2 полупротеза
- 2 задних части, 10 мм
- 2 задних части, 15 мм

В-10-01 (05) / 10-MAR-2017